

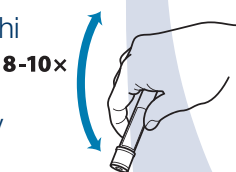
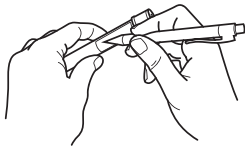
Uriini kandmine vaakumkatsutitesse

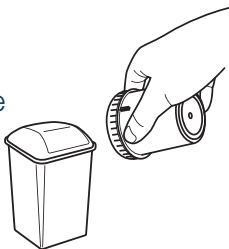
SPETSIAALSE TOPSI ABIL

- 1** Eemaldage topsi kaanelt osaliselt kaitsekleebis

- 2** Suruge uriinikatsuti uriinitopsi kaanes oleva avause põhja

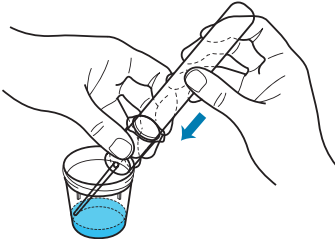
- 3** Hoidke katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab ja eemaldage katsuti

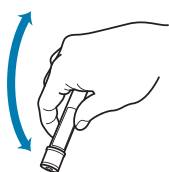
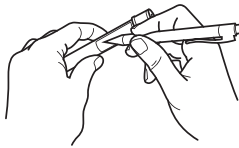
- 4** Keerake katsuti(te) põhi rahuliku liigutusega 8-10 korda ülespidi ja tagasi, et katsutis olev säilitusaine lahustuks

- 5** Markeerige katsutid

- 6** Valage ülejäänud uriin proovitopsist WC potti. Sulgege proovitops kaanega ja kaanel olev avaus uuesti kleebisega

- 7** Hävitage tops vastavalt oma asutuse jäätmekäitluskorrale


KÕRRE ABIL

- 1** Avage proovitops ja asetage spetsiaalne kõrs peene otsaga proovitopsi

- 2** Suruge uriinikatsuti kõrre laia otsa põhja

- 3** Hoidke katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab ja eemaldage katsuti

- 4** Keerake katsuti(te) põhi rahuliku liigutusega 8-10 korda ülespidi ja tagasi, et katsutis olev säilitusaine lahustuks

- 5** Markeerige katsutid

- 6** Valage ülejäänud uriin proovitopsist WC potti, sulgege proovitops kaanega

- 7** Hävitage tops ja kõrs vastavalt oma asutuse jäätmekäitluskorrale

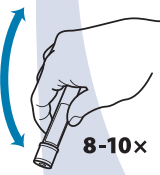
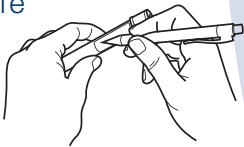

Перенос мочи в вакуумные пробирки

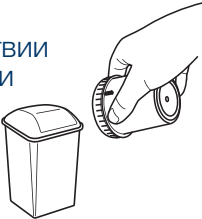
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАКАНЧИКА

- 1** Частично снимите с крышки защитную наклейку

- 2** Вставьте пробирку для мочи в отверстие крышки стаканчика и надавите до упора

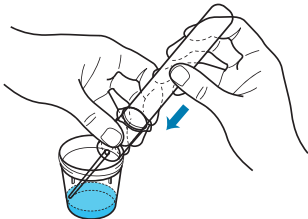
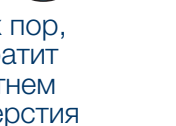
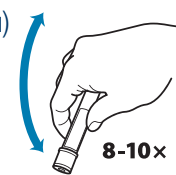
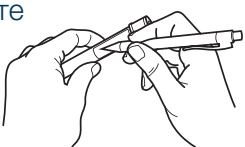
- 3** Держите пробирку до тех пор, пока струя мочи не прекратит поступать в пробирку, затем удалите пробирку из отверстия

- 4** Переверните пробирку(ки) плавными движениями вверх дном и обратно 8-10 раз, чтобы находящийся в пробирке консервант растворился

- 5** Промаркируйте пробирки

- 6** Вылейте оставшуюся в стаканчике мочу в унитаз. Закройте стаканчик крышкой и снова заклейте отверстие крышки защитной наклейкой

- 7** Стаканчик для мочи уничтожьте в соответствии с правилами утилизации в Вашем учреждении


С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРУБОЧКИ

- 1** Снимите со стаканчика для пробы крышку и направьте трубочку тонким концом в контейнер с мочой

- 2** Вставьте пробирку в широкое отверстие трубочки и надавите до упора

- 3** Держите пробирку до тех пор, пока струя мочи не прекратит поступать в пробирку, затем удалите пробирку из отверстия

- 4** Переверните пробирку(ки) плавными движениями вверх дном и обратно 8-10 раз, чтобы находящийся в пробирке консервант растворился

- 5** Промаркируйте пробирки

- 6** Вылейте оставшуюся в стаканчике мочу в унитаз, закройте стаканчик крышкой

- 7** Стаканчик для мочи и трубочку уничтожьте в соответствии с правилами утилизации в Вашем учреждении
