


Proovivõtjuhend ninaneelukaape kogumiseks ja saatmiseks COVID-19 tuvastamise eesmärgil

Proovivõtuks kasuta transportsöötmeta kuiva steriilset tampooni.

Ohutuks proovivõtuks kasuta kaitsekitlit, kummikindaid, respiraatorit ja kaitseprille. Peale proovivõttu viska ära ühekordsed kaitsevahendid ning desinfitseeri käed.

Proovi võtmine:

- 1) Selgita patsiendile proovivõtuprotseduuri.
- 2) Juhul kui patsiendil on nohu, tuleb enne proovivõttu nina nuusata.
- 3) Ninaneelukaabet on kõige parem koguda, kui patsient istub ja kallutab pea kergelt kuklasse.
- 4) Kasuta proovi kogumiseks kuiva steriilset tampooni ning märgista katsuti ribakoodi või patsiendi andmetega.
- 5) Vii tampoon piki ninavahekäiku suunaga allapoole ninaneelu. Täiskasvanutel umbes 5 cm sügavusele, lastel nina ja kõrva suhtes keskele. Roteeri 5 korda vastu ninaneelu limaskesta ja hoia paigal 5 sekundit.

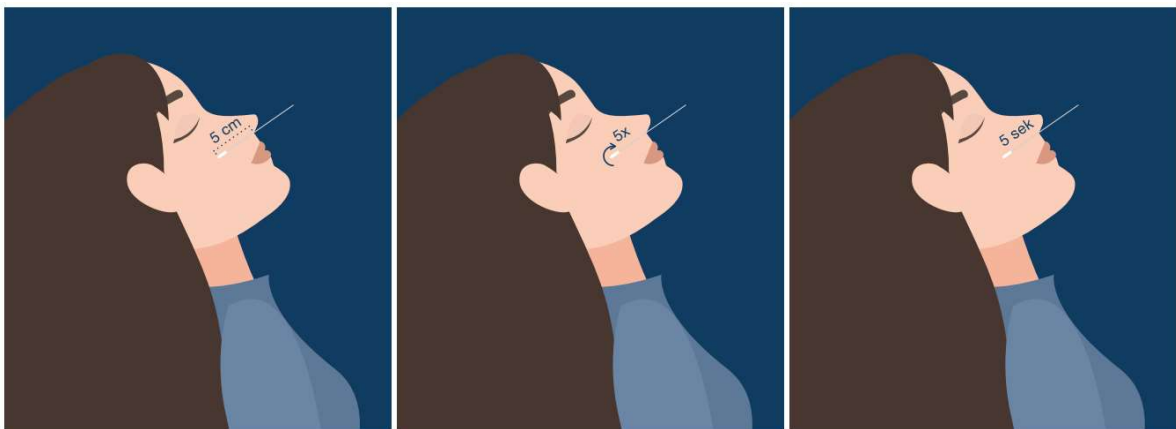

- 6) Eemalda tampoon ettevaatlikult ninast ja asetage tagasi katsutisse.
- 7) Aseta tampooniga katsuti individuaalsesse minigrip kilekotti. NB! väldi kilekoti välispinna kontamineerimist (ära katsu samade kinnastega, millega proov võeti).
- 8) Transportimiseks pakenda kogutud minigrip kottides proovid eraldi suuremasse COVID-19 markeeringuga minigrip kotti.
- 9) Juhul, kui proov saadetakse koos pabersaatekirjaga, pakenda saatekirjad eraldi ühte minigrip kotti.
- 10) Säilita +2...+8 C kuni 72 tundi; >72h korral säilita sügavkülmas.

SYNLAB Eesti klienditugi

Tel: 17123

E-post: klienditugi@synlab.ee

www.synlab.ee